

## • Allgemein


Cannabis ist ein halluzinogener Wirkstoff, der die Sinneswahrnehmung, die Bewegungskoordination und das Gedächtnis verändert. Jede Tat, die Aufmerksamkeit erfordert, besonders das Führen eines Fahrzeugs, ist dann gefährlich. Studien haben gezeigt, dass Fahrer, die in den drei Stunden vor der Fahrt Cannabis konsumiert haben, ein erhöhtes Kollisionsunfallsrisiko haben. Der MEDISURCANNABISTEST ist ein Schnelltest, der Cannabiskonsum in 5 Minuten nachweist. So kann man sich selbst testen, bevor man sich z.B. ans Steuer eines Kfz setzt, oder sein Konsumverhalten ändern.

Wenn eine Person Cannabis einnimmt, werden dessen chemische Derivate mit dem Urin ausgeschieden. Diese Derivate spürt der MEDISURCANNABISTEST auf.

Mit dem MEDISUR-CANNABISTEST kann man sowohl Gelegenheits- als auch Dauerkonsumenten testen. Bei Ersteren ist der Nachweis zwei bis fünf Tage möglich. Bei Letzteren kann der Nachweis mehrere (bis zu 10) Wochen lang geführt werden. Diese Möglichkeit, Cannabiskonsum über einen sehr langen Zeitraum nachzuweisen, ist der Vorteil des Urintests.

## • Packungsinhalt

Die Packung enthält einen Beipackzettel, den Sie für ein zuverlässiges Ergebnis sorgfältig lesen und befolgen müssen, zwei hermetisch verschlossene Beutel, die erst zum Testen geöffnet werden dürfen; sie enthalten eine Testkassette, eine EinwegPlastikpipette und einen Trockenmittelbeutel. Der Trockenmittelbeutel darf nicht geöffnet werden.

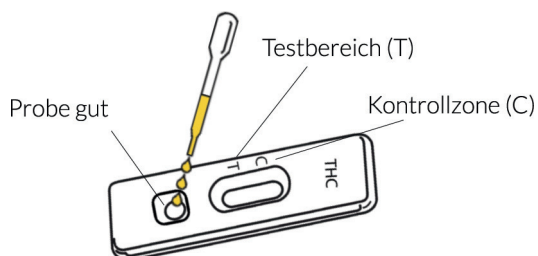

## • Sicherheitshinweise für den Gebrauch


1. Den MEDISUR-CANNABISTEST nicht schlucken.
2. Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen.
3. Der Test ist bei 2°C bis 30°C zu lagern. Er darf nicht eingefroren werden.
4. Der Test muss vor dem auf Packung und Beutel angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.
5. Test außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nach Gebrauch alle Komponenten im Müll entsorgen.

## • Verfahren

1. Sammeln Sie etwas Urin (aber nicht den ersten Strahl) in einem sauberen Behälter (z.B. Plastikbecher).
2. Reißen Sie den Alubeutel an der Einkerbung auf, nehmen Sie nur die Testkassette heraus, legen Sie sie auf eine ebene Oberfläche und entsorgen Sie den Trockenmittelbeutel.
3. Geben Sie mit Hilfe der Pipette 3 Tropfen Urin in die Probenvertiefung, halten Sie die Pipette dabei senkrecht.
4. Das Ergebnis sehen Sie 5 Minuten nach der Urineinfüllung im Ablesefenster. Nach mehr als 10 Minuten nicht mehr auswerten.

## • Interpretation der Ergebnisse


### POSITIV

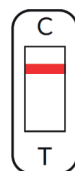

Der Test ist positiv, wenn im Ablesefenster unter der Markierung C (Kontrolle) ein einzelner Streifen erscheint. Dieses Ergebnis bedeutet, dass der Urin Cannabis-Derivate in Konzentrationen oberhalb der Schwelle enthält, ab der die Aufmerksamkeit für gefährliche Tätigkeiten beeinträchtigt ist.


Sie sollten nichts tun, was Ihre volle Aufmerksamkeit oder Konzentration erfordert, etwa Autofahren.

### NEGATIV

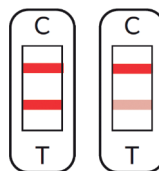

Der Test ist negativ, wenn im Ablesefenster unter den Markierungen T (Test) und C (Kontrolle) zwei Streifen erscheinen. Dies bedeutet, dass der Urin keine Cannabis-Derivate oder einen Anteil an Cannabis-Derivaten unter dem Schwellenwert von 50ng/ml enthält. Die Intensität der Linie T kann geringer sein als die Intensität der Linie C. Dies ändert nichts am Ergebnis.

### UNGÜLTIG

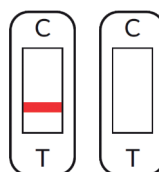

Der Test ist ungültig, wenn im Ablesefenster gar kein Streifen oder ein einzelner Streifen unter der Markierung T (Test) erscheint. Meist geschieht dies, wenn die Gebrauchsanweisung missachtet wird. Lesen Sie die Anleitung sorgsam durch und führen Sie den MEDISUR-CANNABISTEST erneut durch.

## FRAGEN UND ANTWORTEN

### • Wie funktioniert der CANNABIS-URINTEST von Medisur?

Nach dem Konsum von Cannabis scheidet der Körper einige seiner Derivate mit dem Urin aus. Durch Antikörper, die diese Derivate erkennen, weist der MEDISUR-CANNABISTEST deren Vorhandensein nach. Ist die Konzentration dieser Derivate höher als 50ng/ml, so ist der Test positiv.

### • Wann kann der Test durchgeführt werden?

Der Test kann an einer Urinprobe vorgenommen werden, die jederzeit entnommen werden kann.

### • Muss ich mich speziell ernähren?

Ungewöhnlich viel oder wenig zu trinken kann den Test verfälschen. Wenn man am Tag vor dem Test zu viel trinkt, ist der Test falsch-negativ. Wenn man am Tag vor dem Test zu wenig trinkt, ist der Test falsch-positiv.

### • Wie lange kann man Cannabis im Urin nachweisen?

Der Urin eines Gelegenheitskonsumenten wird im Allgemeinen 30 Minuten nach dem Konsum zwei bis fünf Tagen lang positiv sein. Der Urin eines Dauerkonsumenten kann über mehrere Wochen hinweg Spuren des Cannabiskonsums aufweisen.

### • Können falsche Ergebnisse auftreten?

Damit der Test zuverlässig ist, muss die Gebrauchsanweisung strikt befolgt werden. Quantität und Qualität des gesammelten Urins sind entscheidend für ein korrektes Ergebnis. Das Ergebnis kann verfälscht werden, wenn die Kassette vor dem Test feucht ist oder wenn die Menge des in die Probenvertiefung der Kassette gegebenen Urins nicht ausreicht. Die in der Packung mitgelieferte Kunststoffpipette sorgt dafür, dass die richtige Urinmenge gesammelt wird.

### • Ich habe mehr als 3 Tropfen eingefüllt. Bekomme ich ein präzises Ergebnis?

Ja, aber es ist ratsam, die empfohlene Menge (3 Tropfen) einzuhalten.

### • Ich habe weniger als 3 Tropfen eingefüllt. Bekomme ich ein präzises Ergebnis?

Nein. Wenn das Urinvolumen geringer als 3 Tropfen ist, kann der Test ungültig sein.

### • Ich habe das Ergebnis nach 10 Min. abgelesen. Bekomme ich ein verlässliches Ergebnis?

Nein. Das Ergebnis sollte 5 Minuten nach Einfüllung der 3 Tropfen Urin in die Vertiefung der Testkassette gemäß der in der Packungsbeilage enthaltenen Testanleitung abgelesen werden.

Nach 10 Minuten kann das Testergebnis nicht mehr verlässlich ausgewertet werden.

### • Wie ist der Test bei unterschiedlicher Intensität der T- und C-Linien zu interpretieren?

Die Intensität der Linien ist für das Ergebnis bedeutungslos. Die Linien müssen lediglich homogen und durchgehend sein.

### • Wozu dient die Linie unter der Markierung C (Kontrolle)?

Wenn unter der Markierung C eine Linie erscheint, hat der Test funktioniert. Wenn unter der Markierung C keine Linie erscheint, ist der Test fehlgeschlagen. Dann müssen Sie mit einem neuen Test von vorn anfangen.

### • Was soll ich tun, wenn das Ergebnis positiv ist?

Ein positives Ergebnis bedeutet, dass der Test mehr als 50ng/ml THC in Ihrem Urin nachgewiesen hat und Sie vor Kurzem Cannabis konsumiert haben. Sie sollten nichts tun, was Ihre volle Aufmerksamkeit oder Konzentration erfordert, etwa Autofahren.

Stellen Sie den Konsum ein und testen Sie einige Tage später erneut. Bei regelmäßigem Konsum kann der Test mehrere Wochen lang positiv bleiben.

### • Was soll ich tun, wenn das Ergebnis negativ ist?

Ist das Ergebnis negativ, so brauchen Sie keine besonderen Maßnahmen zu treffen.

### • Wie zuverlässig ist der CANNABIS-URINTEST von Medisur?

Die Zuverlässigkeit ist je nach Höhe der Nachweisschwelle unterschiedlich.

| Erkennungsschwelle<br>11-nor- $\Delta^9$ -THC-9 COOH (ng/mL) | Zuverlässigkeit |
|--|-----------------|
| 50   | 87%             |
| 62,5   | 90%             |
| 75   | 100%            |

[contact@medisur.fr](mailto:contact@medisur.fr)  
+33 4 42 96 09 68  
[www.medisur.fr](http://www.medisur.fr)



**MEDISUR**  
100 Impasse des Houillères  
13590 Meyreuil, Frankreich

ref.CANNA\_URI01  
rev. 01/2020

